

CX EASY NECK

Soporte cervical para aliviar la
zona del cuello y los hombros

Neck support to relieve the neck
and shoulder area



SUITX
by ottobock

SUITX
by ottobock.



Saque las partes superior e inferior del envase. Coloque la parte inferior con el lado abierto hacia adelante.

Take the upper and lower sections out of the package. Set down the lower section with the open side facing forward.



Coloque la parte superior sobre la inferior, apoyando ambos pulgares en la superficie estriada y empujando la parte superior hacia atrás. La parte superior encajará en su sitio. Verifique que el ajuste sea igual en ambos lados.

Set the upper section onto the lower section by putting both thumbs onto the corrugated surface and simultaneously pushing the upper section back. The upper section engages. Check that the setting is the same on both sides.



Coloque el soporte cervical montado sobre los hombros y fije las correas al cinturón o a las trabillas.



Place the assembled neck support on the shoulders. Attach the harness to the belt or belt loops.



4

Ajuste la longitud de las correas utilizando las hebillas.

Vary and adjust the strap length using the buckles.



5

Incline la cabeza hacia atrás y compruebe el ajuste correcto. Si es necesario, varíe la longitud de las correas o la posición de la parte superior para lograr un ajuste óptimo.

Tip the head back and check for correct fit. If necessary, alter the strap length or the position of the upper section on the lower section to optimise the fit position.



6

Para soltar la parte superior, coloque los pulgares sobre la superficie estriada y empuje hacia adelante. Alternativamente, coloque los índices en la parte posterior y empuje hacia adelante.




To loosen the upper section, place the thumbs on the corrugated surface and push forward. Alternatively, apply the index fingers to the back of the upper section and push forward.

Tenga en cuenta:

- _Mantener alejado del fuego y del calor
- _Comprobar el ajuste correcto
- _Inspeccionar si hay defectos (grietas, etc.) antes de su uso

Please note:

- _Keep away from fire and heat
- _Check for correct fit
- _Check for defects (cracks etc.) before use

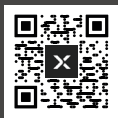

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Str. 15
37115 Duderstadt/Alemania

SUITX by Ottobock
exoskeletons@ottobock.com
www.suitx.com